

Playsafe réadaptation

Instructions:

Un protège-dents Playsafe laminé peut être adapté d'une manière simple à une dentition changée.

Il est le plus important de faire attention que le sportif / la sportive ne mord pas trop fortement dans le protège-dents ramolli.

Il faut faire attention que le matériau ne sera pas coupé avec les dents. Un protège-dents coupé avec les dents perd sa fonction protectrice (voir étape 6 + 7).

Chaque réadaptation amincira légèrement le protège-dents, il est donc recommandé de ne réadapter le Playsafe plus souvent que cinq fois.



1. Mettre le protège-dents pour 10-15 secondes dans l'eau bouillante.



2. L'enlever à l'aide d'une cuillère ou quelque chose similaire.



3. Plonger le Playsafe brièvement dans l'eau froide (2 sec. au maximum).




4. Maintenant la surface est assez froide pour toucher le protège-dents et ...



5. ... l'insérer dans la bouche.



6. Presser le protège-dents prudemment et avec peu de force vers le haut.

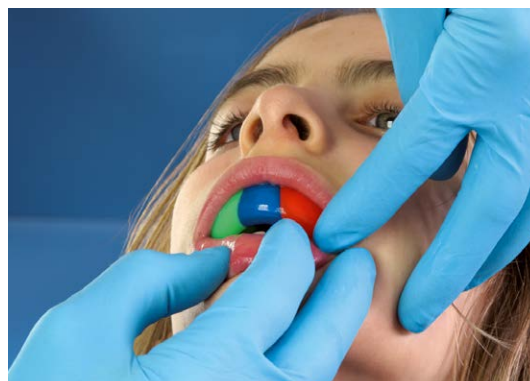

7. Attention, ne laisser pas mordre incontrôlé dans le Playsafe. Préférentiellement guider la mâchoire inférieure du sportif / de la sportive prudemment et avec peu de force dans le protège-dents.



8. Le porteur / la porteuse presse avec la langue vers le protège-dents et l'assistant / l'assistante avec les mains aux joues dans la zone du liséré gingival. Il faut maintenir cette position pour env. 2 min. (!) - fini.



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Allemagne
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0
Fax: + 49 (0) 74 45/85 01-15
info@erkodent.com
www.erkodent.com