

Dublierform

Arbeitsmittel

Zur Herstellung:

- Erkoflex, 3,0 - 5,0 mm

Zur Modellvorbereitung:


- Hochschmelzendes Wachs (725 080) zum Füllen von Gipsblasen

Tipps

- Die Dublierung mit Erkoflex erreicht nicht die Präzision von Dubliermassen. Diese sehr preisgünstige Methode ist geeignet für Anschauungs-, Schulungs- und Planungsmodelle.

1. Modell plan trimmen, auf die Modellplatte des Tiefziehgeräts stellen und tiefziehen.

Komplett abkühlen lassen.

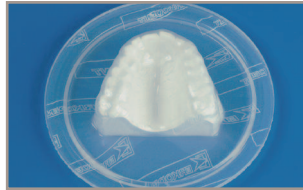

2. Das tiefgezogene Erkoflex wie abgebildet auf einen Ring oder Topf legen, so dass das Negativ nur außen aufliegt. Auf dem Rüttler Gips einfüllen.