

Kennzeichnung:

EG-Richtlinie 93/42/EWG



Beiliegende Dokumente beachten



Gebrauchsanweisung beachten




Einmaliger Gebrauch

Lagerung:


Trocken lagern



Vor Sonnenlicht geschützt lagern

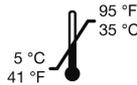

Empfohlene Lagertemperatur

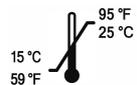

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

Dosierung:

Zu einem gestrichenen Dosierlöffel **Kneton** kommen 1,5 cm Härterpaste (halber Durchmesser der Schöpfkelle)

Anwendung:

Zur Herstellung von Abformungen direkt am Patienten bei Korrekturorthese n. OSM Türk, Vorfuß- u. Zehenersatz, Orthonyxie-Spangen und künstlichen Nagelplatten.

- Kneton 30-45 Sek. mit Härterpaste mischen, bis gleichmäßige Mischfarbe entstanden ist.
- Nach Mischvorgang **Kneton** zu einer Kugel formen und am Patient anformen.

Offene Stellen oder Verletzungen am Fuß immer mit steriler Wundabdeckfolie abdecken. Der Patient hat zur Aushärtung von **Kneton** zu stehen (mind. Teilbelastung), evtl. ist die Ferse zu unterstützen. **Kneton** lässt sich auch nach Aushärtung mit **Sitran-OF** verbinden. Mit **Sitran-OF** lässt sich noch ein genauere Abdruck, der sogenannte Doppelabdruck, herstellen.

Hinweis:

Höhere Umgebungstemperaturen und mehr Härter beschleunigen die Abbindung.

Vorsicht:

Augenkontakt mit Härter vermeiden; Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden.

Technische Daten:

- Mischzeit 30 – 45 Sek.
- Gesamtverarbeitungszeit 1 - 1,5 Min.
- Entformbar nach 3 – 5 Min.
- ca. 60 Shore A
- Mischen kann manuell oder maschinell erfolgen
- Mehr Härter beschleunigt, weniger Härter verzögert die Abbindung
- Desinfektion des Abdruckes mit handelsüblichen Mitteln möglich

Die Verwendung und Anwendung unserer Produkte liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Unsere schriftliche oder mündliche Beratung gilt, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, als unverbindlicher Hinweis. Eine Befreiung von der Pflicht zur eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Tauglichkeit für die beabsichtigte Anwendung ist dadurch nicht gegeben. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt.



(Hersteller)

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO • 13485:2016 • ISO 9001:2015

Labeling:

EC-directive 93/42/EWG



Consult accompanying documents



Read instruction for use




Single use only

Storage:


Keep dry



Keep away from sunlight

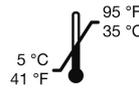

Recommended storage temperature

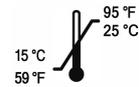

Recommended working temperature

Dosage:

To 1 level measuring spoon of **Kneton**, 1.5 cm of hardener paste are added.

Application:

For the fabrication of impressions directly on the patient for correction orthosis, forefoot and toe compensation, nail clasps or artificial nail plates.

- Mix **Kneton** 30-45 sec. with hardener paste until a uniform mixed colour is achieved.
- After mixing, form **Kneton** to a ball and form it to the patient

Cover open spots or injuries of the foot always with sterile wound cover foil. The patient must stay during the hardening process of Kneton, if necessary, the heel of the foot must be supported. **Kneton** can be combined with **Sitran-OF** even after the hardening process.

With the fine impression material **Sitran-OF**, an even more exact impression can be produced, the so-called double impression.

Hint:

Higher room temperatures and more hardener will accelerate the settings.

Attention:

Avoid eye contact with the hardener; avoid stains on clothes.

Technical data:

- mixing time 30 – 45 sec.
- total working time 1 - 1.5 min.
- remouvable after 3 – 5 min.
- app. 60 Shore A
- mixing can be carried out manually ir by machine
- more hardener will accelerate, less hardener will delay setting
- disinfection of the impression with usual material is possible

The user of our products is the only person responsible for the use and the application of our products. Our verbal and written advice has to be considered as advice without obligation also regarding possible protection rights of third parties. The user is not exempt from the obligation to check our products personally concerning suitability for the intended application. The perfect quality of our products is guaranteed according to our General Terms and Conditions. In any case and for all damage our liability is limited to the value of the goods supplied by us.



(manufacturer)

nt Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 • info@erkodent.com • www.erkodent.com

EN ISO • 13485:2016 • ISO 9001:2015