

Occ3-PMF

Vorrichtung für Printmodelle zur Nutzung des Occluform-3 mit Erkoform-3 Geräten




Video
Occ3-PMF
Anwendung

Occ3-PMF, 188 575:

Modelltopfeinsatz (1) mit Modellscheibe (2) und Spannbacken (3), Gegenbissaufnahme (4), Fixierschlüssel (5) für die Spannbacken.

Der Modelltopfeinsatz (1) reduziert die zu evakuierende Luftmenge für eine schnellere und bessere Anformung.

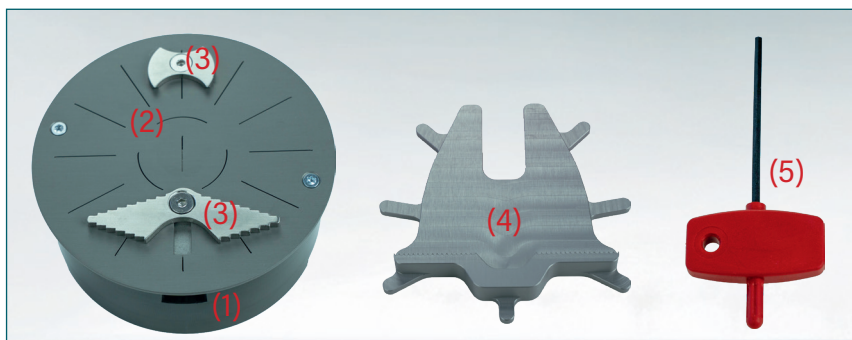

1. Den Occluform-3 Modelltopf aus dem Erkoform-3 Formtopf entnehmen. Eventuelle Verschmutzungen aus dem Formtopf entfernen.




Folgend wird ein Playsafe triple Sportmundschutz tiefgezogen.




2. Den Occ3-PMF Modelltopfeinsatz dafür einsetzen und einrasten. Der breite Spannbacken zeigt dabei zur Markierung am Geräteformtopf.

3. Das OK-Modell einspannen und die Spannbacken fixieren. Das Modell muss bündig auf der Modellscheibe aufliegen.

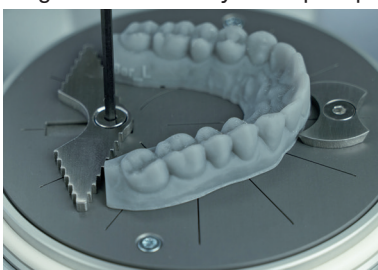



4. Die Occ3-PMF Gegenbissaufnahme in die Occluform-3 Modellplatte einsetzen.

5. Das Modell des Gegenbisses auf die Gegenbissaufnahme setzen und mit dem Occluform-3 Inbuschlüssel fixieren.

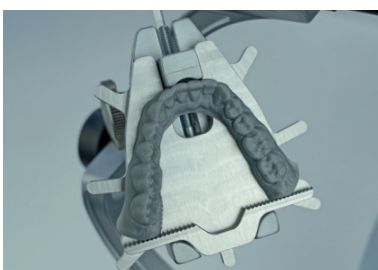

6. Jetzt die Modelle entsprechend der Occluform-3 Anleitung artikulieren (mit Konstruktionsbiss, falls vorhanden).



7. Entsprechend der Playsafe triple Anleitung 2 Playsafe bite spacer über das Gegenbissmodell spannen.

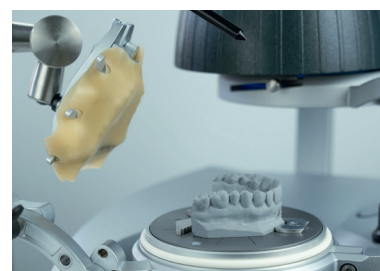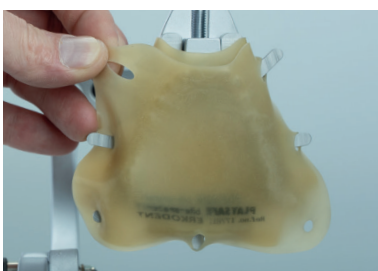

8. Entsprechend der Playsafe triple Anleitung weiterarbeiten und fertigstellen.



CE 0197

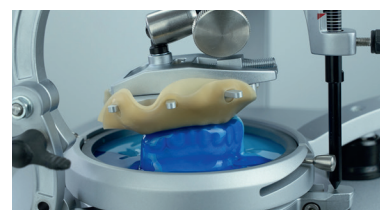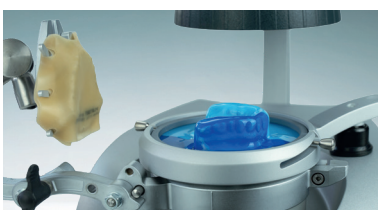

Playsafe triple
Herstellung

Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Germany



Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0
info@erkodent.com
www.erkodent.com
EN ISO 13485 / ISO 9001

Occ3-PMF

Device for print models to use the Occluform-3 with Erkoform-3 units




Video
how to use
Occ3-PMF

Occ3-PMF, 188 575:

Model pot insert (1) with model disc (2) and clamping jaws (3), counterbite holder (4), and fixing key (5) for the clamping device.


The model insert (1) reduces the amount of air to be evacuated for faster and better molding.

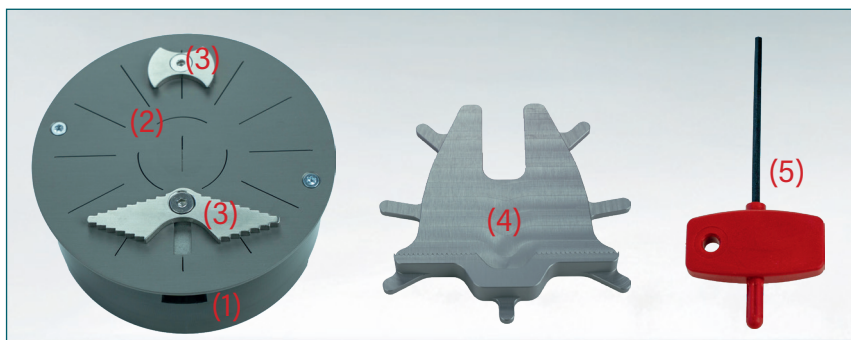


1. Take the Occluform-3 model pot out of the Erkoform-3 form pot. Remove possible impurities from the form pot.




3. Clamp the upper jaw model and fix the clamping jaws. The model must rest flush on the model disc.

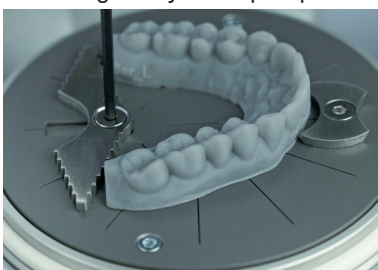

5. Place the counterbite model on the counterbite holder and fix with the Occluform-3 hex wrench.

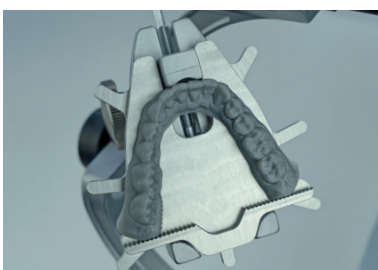

7. According to the Playsafe triple instructions clamp 2 Playsafe bite spacer over the counterbite model.

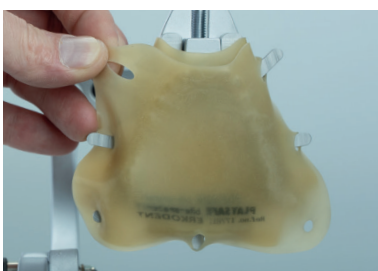

CE 0197

Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Germany



2. For it insert and engage the Occ3-PMF model pot insert. In doing so the wide clamping jaw points to the marking at the unit form pot.






4. Insert the Occ3-PMF counterbite holder in the Occluform-3 model plate.



6. Now articulate the models according to the Occluform-3 instructions (with construction bite, if available).



8. Continue and finish according to the Playsafe triple instructions.

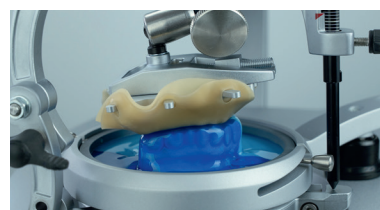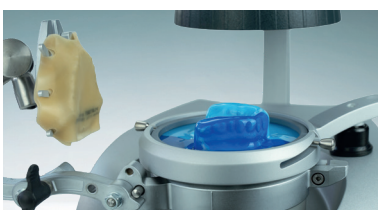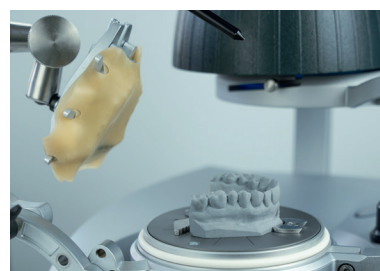

Playsafe triple
Fabrication

Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0
info@erkodent.com
www.erkodent.com
EN ISO 13485 / ISO 9001

Occ3-PMF-anl-DE-EN-24-06-2025