

Playsafe riadattamento

Istruzioni:

Un paradenti sportivo Playsafe laminato può essere facilmente riadattato a situazioni orali che si modificano.

Prestare attenzione, l'atleta non deve mordere troppo nella maschera ammorbidito.

Il rischio di bucare il paradenti è elevato e deve essere ridotto al minimo. Un paradenti sportivo morso perde la sua funzione protettiva. (Vedi passaggio 6 + 7.)

Ad ogni riadattamento, il paradenti sportivo diventa un po' più sottile, quindi si consiglia di non riadattare il paradenti più di cinque volte.



1. Mettere il paradenti sportivo in acqua bollente per 10-15 secondi.



2. Togliere con l'aiuto d'un cucchiaio o altro.



3. Immergere brevemente il Playsafe (massimo 2 secondi) in acqua fredda.




4. Ora la superficie è abbastanza fredda, per poter toccare il paradenti e ...



5. ... posizionare in bocca.



6. Posizionare il paradenti sportivo con attenzione esercitando poca pressione.

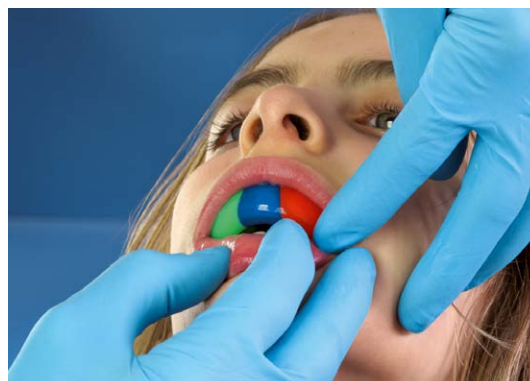

7. **Attenzione, non lasciare mordere in modo incontrollato in Playsafe, ma condurre la mandibola nella corretta posizione dell'atleta esercitando una forza moderata nel paradenti sportivo.**



8. Lo sportivo dovrà premere il paradenti con la lingua e l'operatore con le dita sulle guance nell'area della linea gengivale. Questa posizione deve essere mantenuta per circa 2 min. (!) Lavoro concluso.



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler
Germania
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0
Fax: + 49 (0) 74 45/85 01-15
info@erkodent.com
www.erkodent.com