

Herzlich
Willkommen

zum

Erkodont
Workshop
Onyclip



Überblick...

Was ist Nagelkorrektur?

- Spangenarten
- Wirkungsprinzip

Technische Daten

Warum Klebespangen?

- Gründe für Klebespangen
- Vor- u. Nachteile


Hilfsmittel

Wichtiges!

- Tipps / Info's
- Kalkulation



Onyclip & Erki-Technik

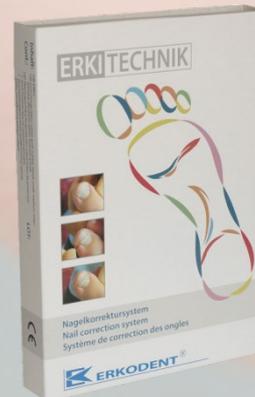

Spangentypen

Klebespangen

Metall

- Goldstadt 1990
- ONYCLIP 1990

Metall / Kunststoff

- Podofix 2008
- Combiped 2010

Kunststoff

- ERKI-Technik 1980
- BS-Spange 1989

Orthonyxiespangen

Metall

- Ross Fraser Spange
- 3TO
- VHO
- ORA

ONYCLIP




ERKI-Technik



Wirkungsprinzip

Klebespangen

- Alle Spangen wirken!
- Unterschiede:
 - Kraft
 - Zeit
 - Anwendung

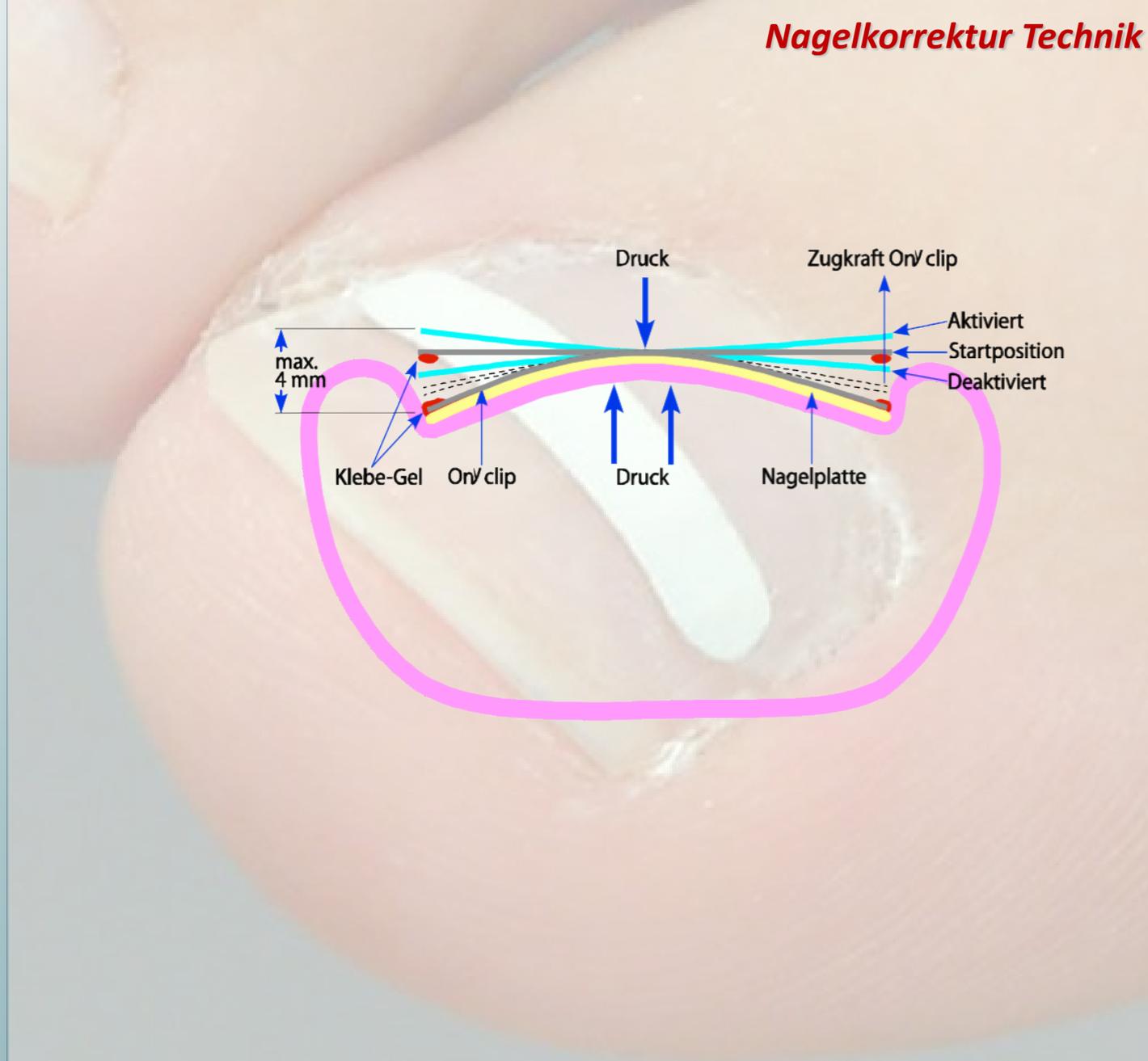

Technische Daten

Onyclip

Material:
Maße (LxBxH):

Edelstahl
100 x 3 x 0,1 / 0,15 mm

Befestigung:
Sonstiges:


Sekundenklebegel
Sand gestrahlt,
Farblich beschichtet

Mindesthaltbarkeit:
Medizinprodukt:

Keine
Ja, Klasse 1

Gründe für Nagelkorrektur

- Schnelle Schmerzbeseitigung
- Langfristige Korrektur
- Keine operativen Eingriffe
- Keine Ausfallzeiten
- Ambulante Behandlung

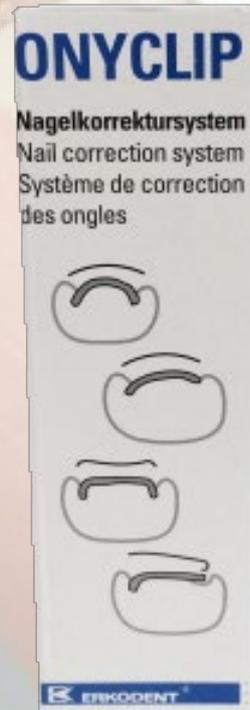

Inhalt:
4x Onyclip-Streifen 0,10 mm
4x Onyclip-Streifen 0,15 mm
2x Klebe-Gel, 1g
1x Spatel
1x Maßband
1x Anleitung

Vorteile

Onyclip


- Mehrmalige Verwendung
- Einfache Handhabung
- Individuelle Formgebung
- Verschiedene Zugkräfte
- Kein Zugkraftverlust
- 2-Punkt-Verklebung
- Geeignet für Diabetiker
- Lackierbar
- Niedriger Einstiegspreis

Nachteile

- „muss korrigiert werden“
- nicht ganz unsichtbar
- kann nur abgehoben werden




Auswahl der Zugkraft

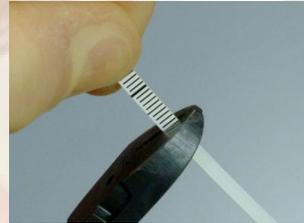


Größe festlegen



Ecken runden

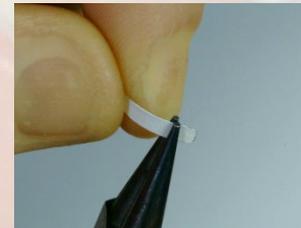


Aktivieren

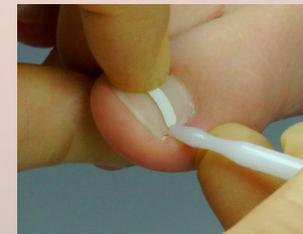


Aufkleben

Hilfsmittel für Onyclip

- Seitenschneider
- Rundzange
- Entfetter

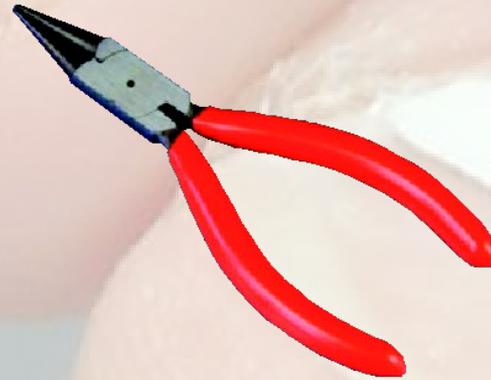

Rundzange

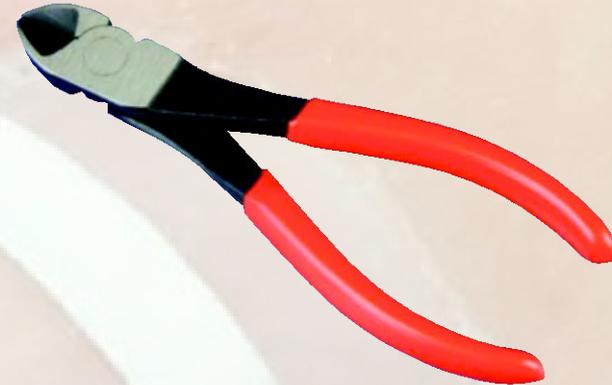

Seitenschneider



Entfetter

Beispiel

Behandlungsdauer:
9 Monate
(Juli - April)
Privatleistung



1



2



3



4



5



Abrechnung

Grundlage

GKV Spitzenverband Stand: 13.06.2022

Position / Preise

HMP4	Preis	Bemerkungen
X8400	47,64 €	Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder Metall Nagelkorrekturspange
X8510	15,19 €	Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz und Passgenauigkeit
X8520	22,71 €	Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange

Denken Sie
daran...

ONYCLIP immer etwas vorbiegen

ONYCLIP nicht zu stark andrücken

ONYCLIP nicht bewegen während des Klebens

ONYCLIP mind. 1 Min. mit dem Spatel in Kontakt halten

Nageloberfläche reinigen

Nageloberfläche glätten

Vielen Dank!



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3,
72285 Pfalzgrafenweiler
info@erkodent.com
www.erkodent.com

