

Novità

Occ3-aM


Dispositivo per l'allineamento del piano occlusale e punto incisale al valore medio utilizzando il portavoro di Occluform-3. Il posizionamento e l'articolazione corrisponderanno quindi a quelli di un articolatore di valore medio.

Occ3-aM è installato per l'allineamento del modello nel contenitore portamodelli di Occluform-3. Il punto incisale sarà indicato alla mascella inferiore o dopo la trasmissione alla mascella superiore.

Le ali pieghevoli controllano la superficie occlusale.

Per allineare il modello, è necessario rimuovere le rondelle di blocco del mandrino del portamodello di Occluform-3.

Occ3-aM può quindi essere utilizzato anche con portamodello già in dotazione con Occluform-3.

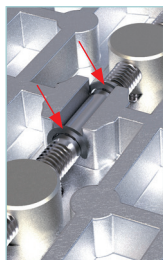

Rimuovere le rondelle di bloccaggio

Punto incisale



Allineamento a valore medio del modello inferiore alla linea mediana e al piano occlusale.

Occ3-aM: 188 589

Novità


Occ3-4p

Accessorio speciale e i file dati per realizzare il fissaggio dei modelli prodotti con qualunque stampante 3d con Occluform-3.


Con Occ3-4p permette di ottenere i vantaggi di Occluform 3 nella registrazione degli splint anche con i modelli senza base.

Occ3-4p set: 188 595


4p-disco speciale per modelli, 4p fissaggio modello antagonista, software per la realizzazione (download)

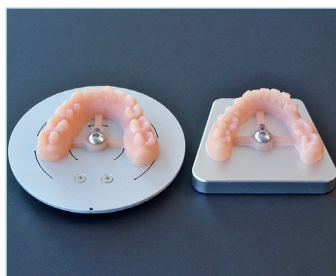

Occ3-4p

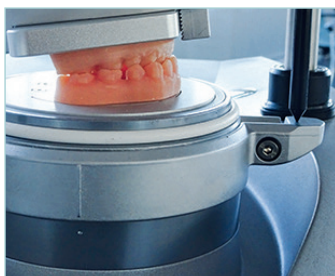

Articolare i modelli stampati

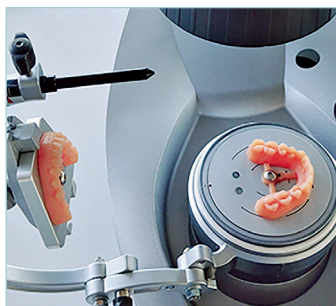

pronto per termoformare



termoformato



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel.: + 49 (0) 7445/8501-0 • Fax: + 49 (0) 7445/8501-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485:2016/ ISO 9001:2015