


25 Farben zur Auswahl:



Wunschfarbe ankreuzen: ☒

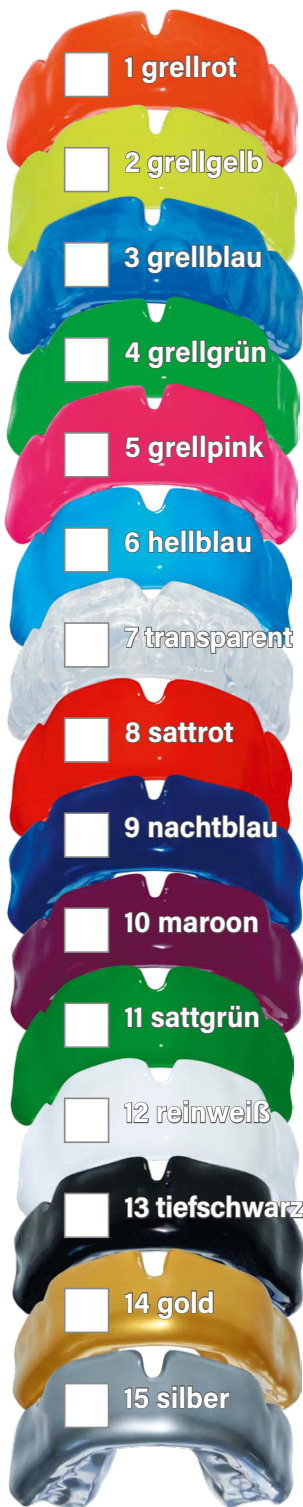

farbliche Abweichungen möglich

Playsafe 4u


Freie Individualisierung Ihres Playsafe triple



Playsafe Sportmundschutz aus bis zu **4** Farben!
Sie können sich Ihren Mundschutz mehrfarbig aus den Farben **1** bis **15** zusammenstellen.

Bitte geben Sie dazu die

Farbnummern an: Beispiel:

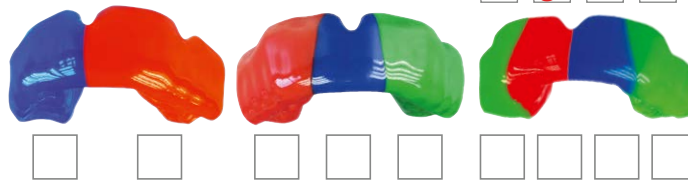

Bitte den gewünschten Playsafe triple ankreuzen: ☒

PLAYSAFE® triple + **PLAYSAFE® triple-light**



Playsafe triple und triple light sind für jede Sportart geeignet.

Playsafe triple light ist für kleine Mundverhältnisse geeignet.

Empfohlen vom 'Verband der Deutschen Boxringärzte e.V.'

Liebe Sportlerin, lieber Sportler, jeder Playsafe triple Sportmundschutz wird nach den Playsafe Richtlinien individuell für Sie hergestellt. Sie bekommen Ihren Playsafe Mundschutz in Ihrer zahnärztlichen Praxis. Dort wird ein Abdruck Ihres Ober- und Unterkiefers genommen. In der Zahntechnik wird dann das Gipsmodell und der Sportmundschutz hergestellt.

Die Kontrolle auf Passung und die Übergabe findet wieder in der zahnärztlichen Praxis statt.

Ein original Playsafe triple Sportmundschutz ist immer 3-schichtig und weist die Playsafe triple Kennzeichnung, den Sportlernamen und die Typenbezeichnung auf.

Ihr Playsafe triple Team:

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH
72285 Pfalzgrafenweiler • Siemensstraße 3 • Deutschland
Tel. + 49 (0) 74 45 / 85 01-0 • info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485 • ISO 9001

PLAYSAFE® triple

Sportmundschutz



Der erste individuell gefertigte Sportmundschutz mit bestandener EU-Baumusterprüfung



ERKODENT®



Warum individuell gefertigter Playsafe triple Sportmundschutz?

Playsafe triple passt exakt auf die Zahnreihe, sitzt fest, erlaubt freies Atmen und normales Sprechen.

Nicht jeder Sportmundschutz ist gleich!

Boil & Bite Versionen (kochen und einbeißen) passen schlecht und sitzen zu locker, sie müssen auf der Zahnreihe gehalten werden und hindern damit an Spitzenleistungen.

Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass ein Boil & Bite Mundschutz durch den beim Anpassen entstehenden, dramatischen Stärkeverlust (Durchbeißen) ein falsches Gefühl von Schutz vorgaukelt.



Boil & Bite Mundschutz

Erster maßgefertigter Sportmundschutz mit **CE** Kennzeichnung zum Nachweis der Konformität mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Persönliche Schutzausrüstung, EU Verordnung 2016/425 (Anhang II):

3-schichtiger


PLAYSAFE® triple-light Sportmundschutz, flexibel mit harter Zwischenschicht:

▷ hart ▷ weich, flexibel
Playsafe triple (-light) ist für alle Sportarten geeignet.

Die harte Zwischenschicht umfasst den ganzen Schutz.

Höchste Schutzleistung bei geringem Volumen!

(Ausgangsstärke Playsafe triple 5,5 mm, Playsafe triple light 4,1 mm)

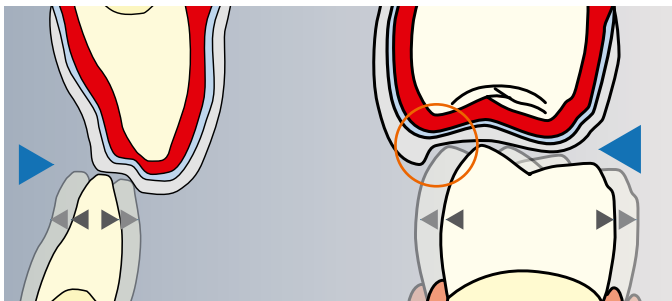

Playsafe triple (-light) weist trotz Bewegungsfreiheit für den Gegenkiefer ein **"buccal shield"** ▶ auf. Diese umlaufende Schutzleiste (orangener Kreis) verhindert zu starke Abweichungen des Unterkiefers bei seitlich auftreffenden Schlägen.

Tests: Intensive Belastungstests beweisen die hohe Schutzwirkung der Playsafe triple Sportmundschutz Typen.

Widerstand gegen Verformung und Schlagpendeltest zur Messung von Kraftabsorption und -verteilung.



... übrigens, jeder Playsafe triple Sportmundschutz kann bei wechselnden Zahnverhältnissen wieder angepasst werden.

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_DE_web.pdf

