

Playsafe protector bucal deportivo hecho de hasta 4 colores! Usted puede poner su protector bucal multicolor de los colores 1 a 15.

Indique los números de los colores:



Por favor, marque el tipo de Playsafe deseado:



PLAY SAFE triple + PLAY SAFE triple light



Playsafe triple y triple light son adecuado para **cualquier deporte**.

Playsafe triple light es adecuado para pequeñas condiciones de la boca.

Recomendado por la Asociación de Médicos de Ring de Boxeo de Alemania.



Querida deportista, querido deportista, cada protector bucal deportivo Playsafe triple está producido individualmente para Ud., según las normas Playsafe.

Playsafe triple es fabricado en su consultorio odontológico. Allá se toma impresiones de la mandíbula superior e inferior.

El modelo de yeso y el protector bucal deportivo se fabrica pues en tecnología dental.

La entrega y el contról se realiza de nuevo en su consultorio odontológico.

Un Playsafe triple original protector bucal deportivo siempre está formado por tres capas, marca el nombre del deportista y la designación de tipo Playsafe triple.

Su equipo de Playsafe triple:

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler Alemania • Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/85 01-15 info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485:2016 • ISO 9001:2015

PLAY SAFE® triple



El primer protector bucal deportivo fabricado individualmente que ha pasado el examen de tipo de la UE







Porque protector bucal individual Playsafe triple?

El protector bucal Playsafe triple encaja exactamente a la fila del diente, se sienta firmemente, permita movilidad para la contra-mandíbula, respiración libre y hablar normal.

Cada protector bucal deportivo es diferente!

El protector bucal Boil & Bite (hervir y morder) encaja mal y afloja. El deportista tiene que mantener este protector bucal en la fila del diente, que le impide su rendimiento máximo.

Muchos estudios scientíficos demuestran, que un simple protector bucal "Boil & Bite" provoca un falso sentimiento de protección por la extrema perdida de fuerza (partir con los dientes) que surge al ajustar. Boil & Bite protector bucal



El primer protector bucal deportivo a medida con marcado (€ para denotar su conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 como EPI de 2ª categoría = Equipo de Protección Individual contra riesgos medios.

Protector bucal deportivo de capas

PLAY SAFE® triple-light

Flexible con capa intermedia dura: blando, flexible


Playsafe triple (-light) es adecuado para cualquier deporte.

La capa dura en el medio cubre todo el protector.

Máxima protección con mínima extensión.

(Espesor total triple Playsafe triple 5,5 mm, Playsafe triple light 4,1 mm)



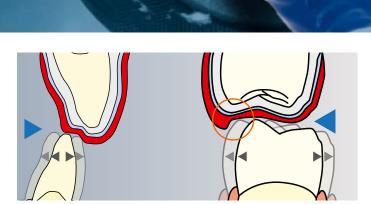

El protección bucal deportiva Playsafe triple (-light) a pesar de la libertad de movimiento para la contra-mandíbula tiene un >,,buccal shield".

Esta tira protectora circunferencial (circulo naranja) evita fuerte desviación de la mandíbula inferior en caso de golpes laterales.

Pruebas: Pruebas de estrés intensivos demuestran la alta protección de los modelos protector bucal deportivo Playsafe triple.

> Resistencia a la deformación y prueba de péndulo de impacto para medición de absorción y distribución de energía.





... por cierto, cada protector bucal deportivo Playsafe triple puede ajustarse de nuevo en caso de que cambien los dientes.

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix EN web.pdf





