

25 couleurs sont disponibles:



Cocher la couleur désirée:



Différences de couleur possibles


### Playsafe 4u

Libre individualisation de votre Playsafe triple




Playsafe triple protège-dents en jusqu'à 4 couleurs!  
Vous pouvez composer votre protège-dents multi-coloré des couleurs 1 à 15  
Pour cela veuillez indiquer les numéros des couleurs:

Exemple: →  4  8  9  4

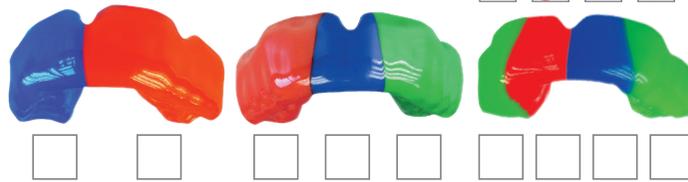

Veuillez cocher le type Playsafe triple désiré:

**PLAYSAFE® triple** + **PLAYSAFE® triple-light**

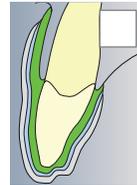

Playsafe triple et triple light sont appropriés pour tous les sports.



Playsafe triple light est approprié pour des proportions de bouche petites.

Recommandé par 'Verband der Deutschen Boxringärzte e.V.'

Chère sportive, cher sportif, chaque protège-dents Playsafe est fabriqué pour vous d'une façon personnalisée selon les règles Playsafe.

Vous obtiendrez votre protège-dents Playsafe dans votre cabinet dentaire. Là une empreinte de votre mâchoire supérieure et inférieure sera prise.

Chez le laboratoire dentaire le modèle en plâtre et le protège-dents seront réalisés.

Le contrôle de l'adaptation et la remise aura de nouveau lieu dans le cabinet dentaire.

Un protège-dents Playsafe triple original est toujours laminé (c'est-à-dire constitué d'au moins deux couches) et porte le nom Playsafe triple, le nom du sportif et l'indication du type.

Votre équipe Playsafe triple:

**ERKODENT®**

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafeweiler  
Allemagne • Tel. + 49 (0) 74 45 / 85 01-0  
info@erkodent.com • www.erkodent.com  
EN ISO 13485 • ISO 9001

**PLAYSAFE® triple**

Protège-dents



CE Le premier protège-dents fabriqué individuellement avec examen CE de type réussi



**ERKODENT®**



### Pourquoi des protège-dents Playsafe triple fabriqués individuellement?

Le protège-dents Playsafe triple s'applique exactement sur l'alignement des dents, ne bouge pas, permet de respirer librement et de parler normalement.

### Les protège-dents ne sont pas tous égaux!

Des protège-dents Boil & Bite (bouillir et mordre) s'appliquent de mauvaise façon et ne restent pas en place.

Le sportif doit tenir le protège-dents sur l'alignement des dents et pour cela il est gêné dans son activité. **Protège dents Boil & Bite**

Beaucoup d'études scientifiques montrent qu'un protège-dents Boil & Bite donne un faux sens de protection en raison d'une importante perte de l'épaisseur (coupé avec les dents) pendant l'adaptation dans la bouche.

Le premier protège-dents fabriqué sur mesure avec marquage CE pour prouver la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour des équipements de protection individuelle, règlement UE 2016/425 (annexe II):



**Tests:** Des stress tests intensifs font preuve de l'effet de protection supérieur des types Playsafe triple protège-dents.

Résistance à déformation et test pendulaire des chocs pour mesurer l'absorption et répartition de force.



### Protège-dents à **3** - couches **PLAYSAFE® triple-light**

flexible avec couche intermédiaire dure:


▷ dur ▷ mou, flexible

Playsafe triple (-light) est approprié pour tous les sports.

La couche intermédiaire dure comprend la protection complète.

Meilleure protection avec extension minimale!

(épaisseur totale Playsafe triple 5,5 mm, Playsafe triple light 4,1 mm)

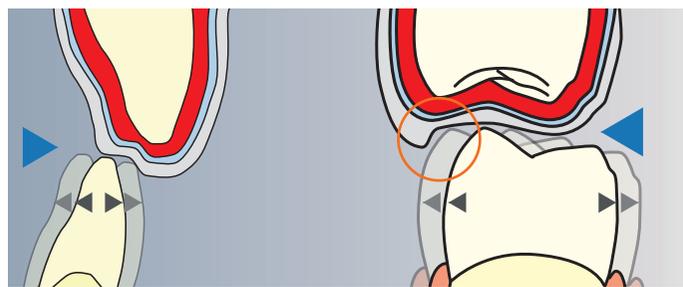

Playsafe triple (-light) montre un ► **"buccal shield"** (bouclier buccal) malgré la liberté de mouvement pour l'antagoniste. Ce listeau de protection périphérique (cercle orange) évite des déviations trop grandes de la mâchoire inférieure en cas des chocs heurtant latéralement.

**... à propos, chaque protège-dents Playsafe triple peut être adapté à une dentition changeante.**

[https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix\\_FR\\_web.pdf](https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_FR_web.pdf)

