

Er zijn **26** verschillende
kleuren beschikbaar:



gewenste kleur aanvinken: ☒

Playsafe 4u

Uw Playsafe triple is ook
nog individueel
aanpasbaar.




kleurvarianties mogelijk

De Playsafe mondbeschermer is leverbaar met tot wel **4**
kleurbanen! U kunt zelf uw eigen kleurcombinatie
samenstellen uit de kleuren **1 t/m 15**

Geef hieronder uw keuze aan:

Voorbeeld: →

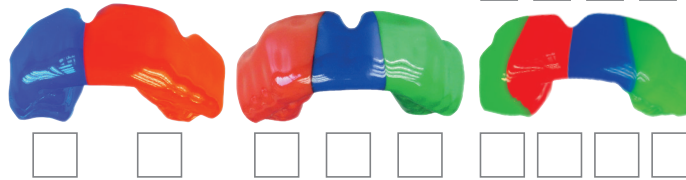

Kies ook het juiste type: ☒

PLAYSAFE® triple + **PLAYSAFE® triple-light**



Playsafe triple en triple light zijn
geschikt voor iedere sport.

Playsafe triple light is dunner en
daardoor geschikt voor jonge
sporters.

Aanbevolen door het
'Verband der Deutschen Boxingärzte e.V.'

Beste Sporter,
Iedere Playsafe mondbeschermer wordt vervaardigd door
een gecertificeerde tandtechnicus volgens richtlijnen van de
fabrikant.
U krijgt uw Playsafe mondbeschermer via de
tandartspraktijk. Daar worden afdrucken gemaakt van boven
en onderkaak.
De gipsmodellen en de mondbeschermer worden
vervaardigd in een tandtechnisch laboratorium.
De eindcontrole op pasvorm en retentie wordt gedaan door
de tandarts.

Een originele Playsafe triple
mondbeschermer is altijd
gelamineerd en bestaat uit
drie lagen en heeft een label
met typeaanduiding met de
naam van de sporter.

Uw Playsafe team:



Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Germany • Tel. + 49 (0) 74 45 / 85 01-0 • info@erkodent.com
www.erkodent.com • EN ISO 13485 • ISO 9001

PLAYSAFE® triple

Mondbescherming



De eerste individueel vervaardigde
sportmondbeschermer die een
Europees **CE** label mag dragen





Waarom individueel vervaardigde mondbeschermers?

Playsafe triple mondbeschermers passen exact op het gebit, zitten daarom vast en maken het mogelijk om verstaanbaar te communiceren.

Niet alle mondbeschermers zijn gelijk!

Boil & Bite mondbeschermers passen onvoldoende en komen makkelijk los. De atleet moet de mondbeschermer met de tong op de plaats houden, dit leidt natuurlijk niet tot goede prestaties.

Vele wetenschappelijke studies tonen aan, dat een boil & bite mondbeschermer, door de bij het aanpassen optredende dikteverlies (door het plaatmateriaal heenbijten) een vals gevoel van veiligheid geeft.



Boil & Bite mondbeschermer

De Playsafe Triple is de eerste op maat gemaakte mondbeschermer met **CE** certificering. Voldoet aan de veiligheids- en gezondheidseisen die gesteld worden aan persoonlijke beschermingsmiddelen; EU verordening 2016/425 (bijlage II):

3-laags mondbeschermer **PLAYSAFE® triple-light**

flexibel met harde tussenlaag:


▶ hard ▶ zacht en flexibel

Playsafe triple (-light) is geschikt voor alle soorten sporten.

De harde tussenlaag loopt door onder de gehele mondbeschermer.

Dit materiaal geeft de hoogst mogelijke bescherming!

(Totale dikte Playsafe triple 5,5 mm,
Playsafe triple light 4,1 mm)

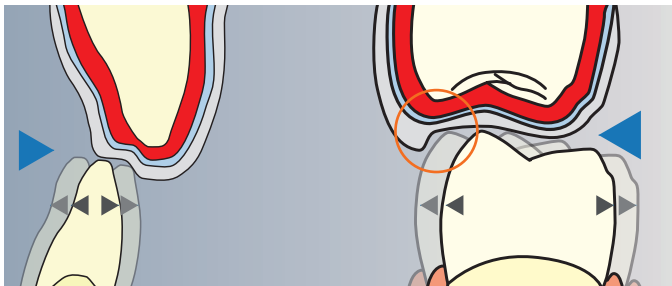


Playsafe triple (-light) biedt enige bewegingsvrijheid voor de onderkaak en een „buccaal schild“ ▶ ter bescherming van de ondertanden. Deze beschermlijst (oranje cirkel) verhindert een ongewenste zijdelingse beweging van de onderkaak bij zijdelings optredende krachten, waardoor de kaakgewrichten beschadigd zouden kunnen raken.



Testen: intensieve testen onderschrijven het beschermende effect van een Playsafe triple mondbeschermer.

Vervormingsweerstand- of slagpendulumtest voor het meten van de slagabsorptie en krachtverdeling

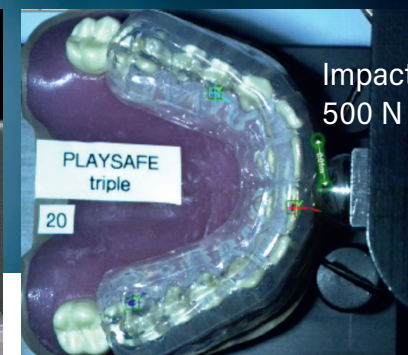

Let op! Alle Playsafe types kunnen een aantal keren worden aangepast aan de veranderde posities van tanden en kiezen.

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_EN_web.pdf

